

## Infarm Visual Version 9.81

### SISTEMA ESPAÑOL DE VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS

NORMATIVA EUROPEA. Desde el 9 de febrero de 2019 todos los medicamentos que contengan código datamatrix deberán ser dispensados usando este código.

### CODIGO DATAMATRIX ¿QUE ES?

Permite la identificación inequívoca del envase, no como actualmente que la identificación es del producto dispensado.

A continuación se muestra un ejemplo de un código DATAMATRIX.



En algunos productos, pueden encontrar un código muy parecido y que NO ES UN DATAMATRIX.

A continuación se muestra un ejemplo de un código muy similar a un DATAMATRIX pero que no lo es.



## FUNCIONAMIENTO

Actualmente todas las funcionalidades del proyecto Sevem **SOLO** se encuentran disponibles en la pantalla de venta. Esto quiere decir que actualmente ni en la pantalla de receta electrónica, ni en pedidos, deberán ser leídos estos códigos ya que el sistema los ignora aun en dichas secciones del programa.

### RECETA ELECTRÓNICA (TODAS LAS COMUNIDADES), RECETAS MANUALES Y DE OTRAS COMUNIDADES O RECETAS INFORMATIZADAS. (CASTILLA-LA MANCHA).


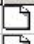


[¿Debo leer los códigos datamatrix durante la dispensación en receta electrónica, recetas informatizadas o recetas manuales y de otras comunidades?](#)

NO, usted actualmente en estas pantallas seguirá leyendo los códigos de barras habituales o tecleándolo manualmente con el teclado.





[¿Cuándo se deben leer los códigos datamatrix en una dispensación de receta electrónica o recetas de papel?](#)

Después de pulsar en F3 DISPENSAR y aceptar la venta de electrónica, el programa incorpora los productos a la pantalla de venta. Es en ese momento y antes de finalizar la venta con F10 CAJA donde deberá leer los códigos datamatrix de los productos si los hubiese. Si en su venta actual no hay ningún código datamatrix finalice la venta como hasta ahora.

[Ejemplos de la pantalla de dispensación después de una venta en receta electrónica o de papel.](#)

Cip	Cliente	Cuenta	Saldo				
Código	Nombre y descripción	Dispensac	Cant	P.V.P.	P.Menor	Aportacion	Importe
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 C 	EFG	1	3.11	3.11	A40	1.24
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 C 	EFG	1	3.11	3.11	A40	1.24
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 C 	EFG	1	3.11	3.11	A40	1.24

Como se puede ver en la imagen anterior hasta aquí no hay ninguna diferencia. Es en este punto, es donde deberá leer los códigos datamatrix, si es que hubiese alguno en los productos dispensados, y la línea del producto del que leamos su datamatrix pasara a verse como el ejemplo.

Código	Nombre y descripción	Dispensac	Cant	P.V.P.	P.Menor	Aportacion	Importe
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 C 	EFG	 1	3.11	3.11	A50	1.56
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 C 	EFG	 1	3.11	3.11	A50	1.56
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 C 	EFG	1	3.11	3.11	A50	1.56

[¿Qué ocurre si no se lee o no se dispone de envases con códigos Datamatrix?](#)

El sistema se comporta como hasta ahora, no notara ninguna diferencia en el funcionamiento con respecto a lo que usted conoce.

### RECETAS DE PAPEL (MADRID Y EXTREMADURA)

[¿Cuándo debo leer el código datamatrix al dispensar una receta de papel?](#)

La mecánica será la de siempre salvo que ahora deberá leer el código datamatrix si lo hubiese en el producto a dispensar antes de finalizar la venta en la pantalla de dispensación.

## CAMBIOS Y EJEMPLOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA PANTALLA DE DISPENSACION.

### ¿Qué ocurre si se lee un código datamatrix?

El sistema automáticamente hará una consulta sobre el envase que se pretende dispensar y se darán los siguientes posibles casos.

#### Ejemplo de que el producto 684934 se está verificando.

Como ve en la imagen aparece un nuevo icono al lado de la cantidad. El icono que se muestra en la imagen siguiente indica que el producto se está verificando con nodofarma.

Cip	Ciente	Cuenta	Saldo	Supr	Dispensación	Cant
Código	Nombre y descripción					
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM				EFG	1


#### Ejemplo de que el producto 684934 ya ha sido verificado.

En el siguiente ejemplo, el icono que aparece al lado de la cantidad del producto indica que el proceso de verificación ha terminado de forma satisfactoria.

Cip	Ciente	Cuenta	Saldo	Supr	Dispensación	Cant
Código	Nombre y descripción					
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM				EFG	1

Al finalizar la venta, el envase o los envases dispensados se registran en la central de Nodofarma y figuraran como dispensados en su base de datos. Esto implica que este envase en ninguna farmacia podría volver a ser dispensado.


### ¿Qué ocurre si se recibe un mensaje sobre algún producto?

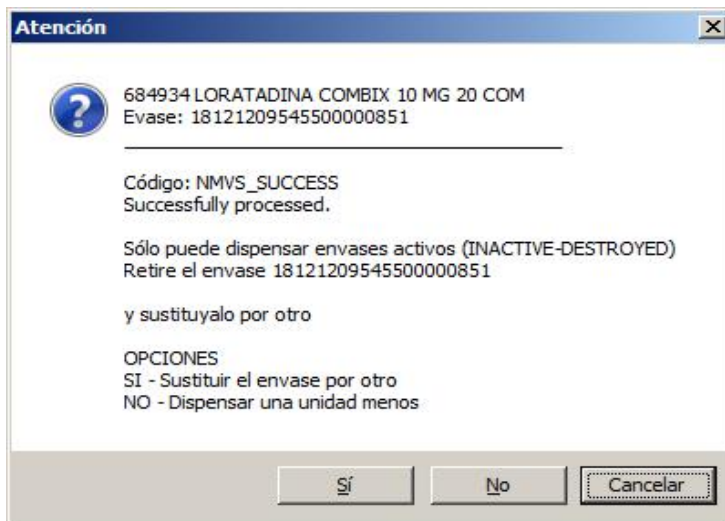

En el ejemplo, se informa de que el producto está marcado como destruido (INACTIVE-DESTROYED) y no podrá dispensarlo. En este caso debe eliminar la línea de venta o sustituirlo por otro envase.

## [¿Cómo se realiza una devolución de un producto con código datamatrix en la pantalla de ventas?](#)

Al introducir el código datamatrix en la pantalla de ventas, recibiremos el siguiente mensaje.

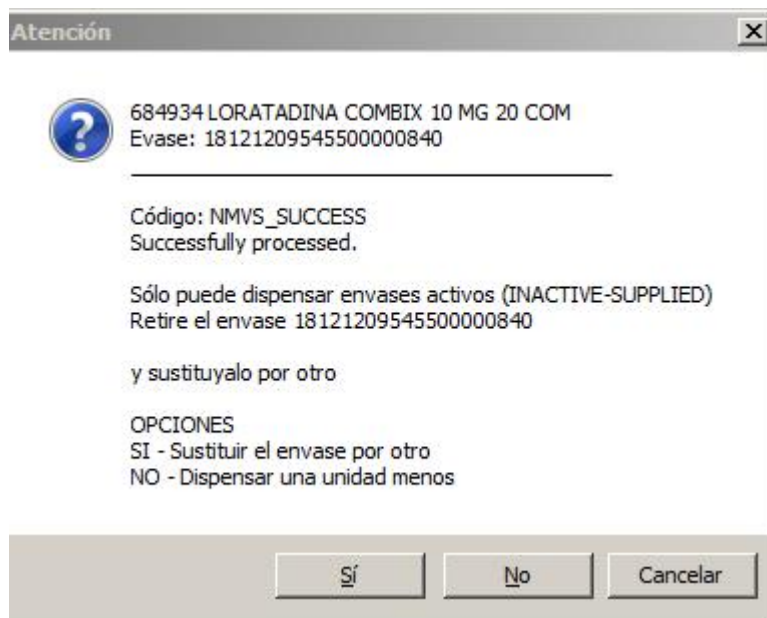

Este mensaje nos indica que el envase ya fue dispensado y por tanto está marcado como inactivo (INACTIVE-SUPPLIED).

Para realizar la devolución o venta negativa si recibimos el mensaje anterior deberemos realizar los siguientes pasos:

- PULSAR SI.
- CAMBIAR LA CANTIDAD A -1.
- VOLVER A LEER EL PRODUCTO DATAMATRIX.
- TOTALIZAR LA VENTA PARA CERRAR LA DEVOLUCIÓN.

En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de devolución.

Código	Nombre y descripción		Dispensación	Cant
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM		EFG	 -1

Al finalizar la operación, el producto vuelve a estar disponible para su venta y por tanto pasa a situación de activo.


Esta operación solo puede hacerse desde la farmacia que ha dispensado el envase.

## [¿Qué ocurre si no puedo leer el código Datamatrix?](#)

En caso de que el envase disponga de código Datamatrix pero no sea legible iniciaríamos la entrada "MANUAL" del mismo.

Para este caso deberemos seguir los siguientes pasos en la pantalla de dispensación:

- Identificar el producto en la pantalla de venta de la manera habitual, bien leyendo su código de barras tradicional o tecleado su código nacional en la pantalla de dispensación.
- Una vez identificado, iremos a la opción que está en la parte superior "PRODUCTOS" y haremos click en "SEVEM: otras funciones. En el ejemplo inferior se muestra una imagen de dicha opción.

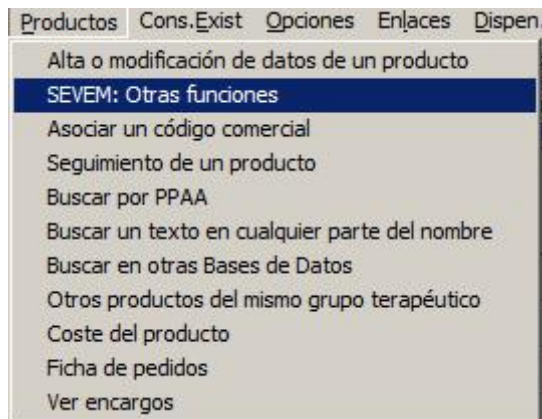

- El programa nos mostrara la siguiente ventana.

A screenshot of a software window titled 'Sevem Validación Manual'. The window contains three input fields: 'PC' (empty), 'SN' (empty), and 'CN' (containing the value '6849347'). Below the input fields, there is a blue button labeled 'Esc Salir' and two grey buttons: 'Verificar y Anotar' and 'Otras Funciones'.

- Introduciremos los valores en los campos adecuados tal como vienen en la caja al lado del código datamatrix y para finalizar pulsaremos en "Verificar y Anotar"

### [¿Qué ocurre si hay un fallo en las comunicaciones con Nodofarma?](#)

Usted continuara leyendo los códigos datamatrix, y finalizara la venta, como si no ocurriera nada.

El sistema mostrara el siguiente mensaje.



Al aceptar el mensaje, continúe con la dispensación, y verá el siguiente efecto.

Código	Nombre y descripción	Dispensación	Cant
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM	EFG	1
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM	EFG	1
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM	EFG	1
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM	EFG	1
684934 7	LORATADINA COMBIX 10 MG 20 COM	EFG	1

La marca triangular en la columna de cantidad es de color rojo. Continúe la dispensación normalmente, como si no ocurriera nada.


Internamente el sistema acumula la información de estas dispensaciones y las enviara automáticamente a Nodofarma cuando el servicio este restablecido.

### [¿Qué ocurre si mi programa de gestión no funciona?](#)


Los diferentes colegios les proporcionaran acceso a una página web en la que se podrán grabar las dispensaciones, independientemente de su software de gestión.

[Funciones Sevem no asociadas al proceso de venta y que pueden ser de utilidad en muchas situaciones.](#)

Desde la opción Productos -> Seven: otras funciones sin identificar ningún producto en la pantalla de venta nos aparecerá la siguiente ventana.

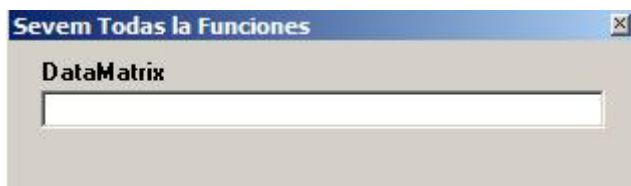

Si leemos el código Datamatrix en esta opción podremos realizar las siguientes opciones:

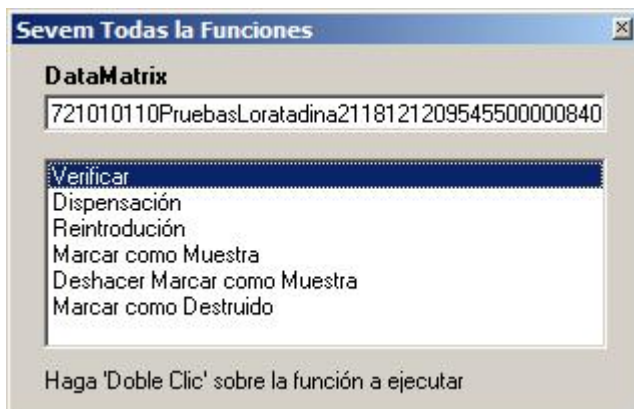

#### Verificar

Nos informara del estado en que figura el envase.

#### Dispensación

Graba en la central de Nodofarma el código del envase como dispensado.

#### Reintroducción

Un envase que ya fue dispensado, es anulado y vuelve a ser apto para la dispensación (devolución del producto).

#### Marcar como muestra

El producto es marcado para que no se pueda dispensar, si bien no ha sido vendido a ningún cliente.

#### Deshacer marcar como muestra

Anula a la operación anterior, por lo que el envase vuelve a ser apto para su dispensación. Marcar como destruido

El envase queda registrado para que no sea dispensable. (Proceso irreversible).